

Flow Cytometry

精選產品 凡購買10,000元 好禮任您選




隨意搭配下列產品，訂單滿萬即可任選贈品。

*贈品請參閱型錄背面品項，活動截止日 2022/10/31

品號	品名	規格	應用
TNB-0607-KIT	Tonbo Foxp3 / Transcription Factor Staining Buffer Kit	1 Kit	Flow 實驗
35-6410-KIT	Tonbo FITC Annexin V Apoptosis Detection Kit with 7-AAD	1 Kit	Flow 實驗
50-6410-KIT	Tonbo PE Annexin V Apoptosis Detection Kit with 7-AAD	1 Kit	Flow 實驗
20-6410-KIT	Tonbo APC Annexin V Apoptosis Detection Kit with 7-AAD	1 Kit	Flow 實驗
TNB-4975-UL400	Tonbo Cell Stimulation Cocktail (500X)	4 x 100 µL	Flow 實驗
TNB-4970-UL400	Tonbo Cell Stimulation Cocktail (500X) (w/o protein transport inhibitors)	4 x 100 µL	Flow 實驗
TNB-4222-L500	Tonbo Flow Staining Buffer (1X)	500 mL	Flow 實驗
SCR005	Merck Accutase cell detachment solution	100 mL	Flow 實驗
430167	Corning 100mm TC-Treated culture dish	20/pk, 500/cs	細胞培養
430641U	Corning 75 cm2 U-shape 培養瓶	5/pk, 100/cs	細胞培養
3516	Corning 6 well culture plate	1/pk, 50/cs	細胞培養
431118	Corning 500mL 0.22um 45mm Bottle Top Vacuum Filter 過濾頭	1/pk, 12/cs	細胞培養
430791	Corning 15mL PP 離心管	50/pk, 500/cs	細胞培養
430829	Corning 50mL PP 離心管	25/pk, 500/cs	細胞培養
4488	Corning 10mL Serological Pipets	50/pk, 200/cs	細胞培養
432061	Corning CoolRack 15ml, holds 9 x 15ml conical centrifuge tube	1/pk	細胞冷凍盒
432049	Corning CoolRack CF15, holds 15 cryovial or FACS tubes	1/pk	細胞冷凍盒
432014	Corning XT Starter complete, Low profile, open platform ice-free cooler	1/pk	細胞冷凍盒
01-867-1B	Sartorius (BI) Aquaguard-1 Solution 抑黴劑	100 mL	污染防治
01-916-1E	Sartorius (BI) Aquaguard-2 Solution 抑黴劑	50 mL	污染防治
BUF035	Bio-Rad Mycoplasma Removal Agent	5 mL	污染防治
BUF012A	Bio-Rad alamarBlue®	25 mL	細胞活性實驗
BUF012B	Bio-Rad alamarBlue®	100 mL	細胞活性實驗






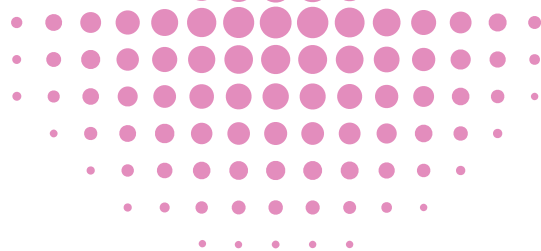

Foxp3/Transcription Factor 流式分析實驗染色幫手

含特殊設計的配方，可以讓您在使用流式實驗分析核蛋白時，強化訊號解析度跟降低背景值。可按需求挑選完整套組或只選購染色緩衝溶液套組，都能幫助您得到最佳的實驗結果。內含：

- Foxp3/Transcription Factor Fix/Perm Concentrate (4X) 50 mL
- Foxp3/Transcription Factor Fix/Perm Diluent (1X) 160 mL
- Flow Cytometry Perm Buffer (10X) 150 mL

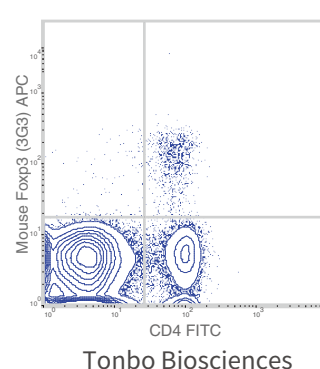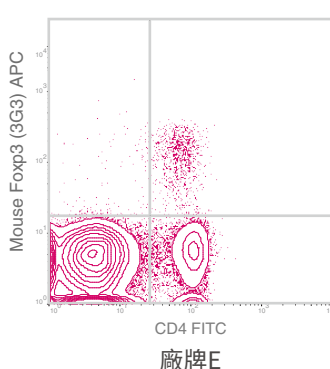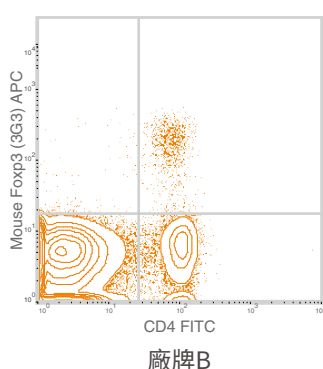


流式細胞實驗驗證的最佳選擇 – 相同優秀的結果、比較優惠的價格

C57Bl/6小鼠脾臟使用FITC Anti-Mouse CD4 抗體染色接續染色胞內APC Anti-Mouse Fxp3 (clone 3G3)抗體。胞內染色分別使用不同供應商與 Tonbo Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Kit (TNB-0607-KIT)

Annexin V Apoptosis Detection Kit with 7-AAD 完美偵測細胞凋亡

Annexin V是其中一種與鈣離子相關的磷脂結合蛋白，對於磷脂絲胺酸(phosphatidylserine)具有高度的親和性。在細胞凋亡早期的一個特徵就是磷脂絲胺酸從細胞膜內側翻轉暴露於細胞膜外側，所以可以被有螢光標記 Annexin V偵測到細胞凋亡的變化。而搭配 7-AAD (7-Aminoactinomycin D)這種核酸染劑，就可以幫助在流式細胞實驗中區分死細胞與活細胞族群的分析。

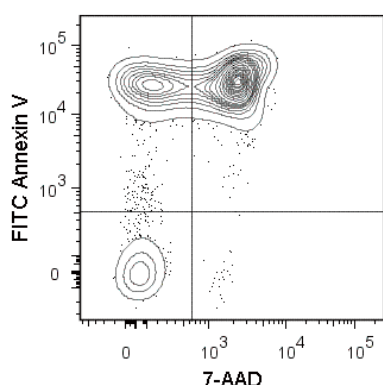

- 提供 PE、FITC、APC 三種螢光選擇，搭配更彈性。
- 提供附7-AAD版本套組或單獨購買。

品號	品名	規格
50-6410-KIT	PE Annexin V Apoptosis Detection Kit with 7-AAD	100 Tests
20-6410-KIT	APC Annexin V Apoptosis Detection Kit with 7-AAD	100 Tests
35-6410-KIT	FITC Annexin V Apoptosis Detection Kit with 7-AAD	100 Tests
50-6409-T100	PE Annexin V	100 Tests
20-6409-T100	APC Annexin	100 Tests
35-6409-T100	FITC Annexin V	100 Tests

CORNING

XT Starter 無冰開放式低溫平台

#432014

- 含一個紫色外盒和一個 XT Cooling Core。
- Ice-free 設計，適合無菌操作台內操作，降低汙染風險。
- 搭配 XT Cooling Core 可維持樣品在 0.5 - 4°C 的低溫達 4 小時。
上方具備 1 - 8°C 溫度指示條，可隨時確認工作平台的溫度。

XT Cooling Core

XT Holder



可額外選配多樣化的CoolRack Modules，提供最佳的樣品儲存條件。
模組可確保所有試管在冷卻、速凍、加熱或解凍時均可實現 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 的溫度一致性。



CoolRack CF15

#432049

可放 15 支 FACS Tube /
冷凍小管



CoolRack 15ml

#432061

可放 9 支 15mL 錐形離心管



500 mL Bottle Top Filter (0.22 μm)

#431118

- 45 mm 瓶頸尺寸，適用大多數玻璃和塑膠培養基儲液瓶。
- PES 濾膜具有流速最快、蛋白結合量最低且溶出低的特點，適合過濾細胞培養基。
- 採用低殘留過濾系統，大幅降低滯留體積，減少每次過濾的浪費。

alamarBlue[®]

Cell proliferation and viability reagent

- 可應用於各種人類和動物細胞、細菌和真菌檢體
- 提供 **無需破壞細胞** 的細胞增殖和毒性分析，突破傳統MTT方式
- 高靈敏定量偵測，只需**50顆細胞**
- 經細胞生長代謝，由藍色(氧化態)轉變為粉紅色(還原態)

品號	規格 (96-well plate)
BUF012A	2,500 wells
BUF012B	10,000 wells





Mycoplasma Removal Agent (MRA)

Prevent & decontaminate cell culture infection

- 使用簡單 1:100 倍稀釋加入，只需七天即可清除Mycoplasma汙染
- 無細胞毒性，不影響細胞生長
- 有效對抗多種黴漿菌，包括Mycoplasma orale, M. arginini, M. hyorhinitis, Achleplasma laidlawii

品號	規格
BUF035	5 mL

- MRA

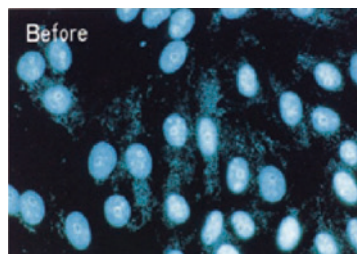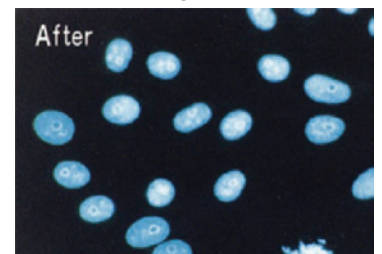+ 0.5 $\mu\text{g}/\text{mL}$ MRA

優質贈品任您挑選



其他Flow相關試劑

品號	品名	規格
TNB-4300-L100	RBC Lysis Buffer (10X)	100 mL
TNB-4975-UL100/400	Cell Stimulation Cocktail (500X)	100 μ L / 4 x 100 μ L
TNB-4970-UL100/400	Cell Stimulation Cocktail (w/o protein transport inhibitors) (500X)	100 μ L / 4 x 100 μ L
TNB-8222-L100	Fixation Buffer	100 mL
TNB-4700-L100	Lymphocyte Separation Medium	100 mL
TNB-4222-L500	Flow Staining Buffer (1X)	500 mL
TNB-4600-L600	Sheath Fluid (30X) for 20L	667 mL

CORNING



10P Tips

#4110 (1000/PK, 10000/CS)

#4120 (96 Tips/Rack, 40 Rack/CS)

CORNING

15mL PP Centrifuge Tubes

#430791 (50/PK, 500/CS)



CORNING



500 mL Bottle Top Filter (0.22 μ m)

#431118 (1/PK, 12/CS)

MERCK

- 溫和型非哺乳動物來源的Trypsin替代物
- 適用於primary cell culture

Accutase Cell Detachment Solution

#SCR005 (100 mL)



SARTORIUS

污染防治系列產品

Aquaguard -1 (100X) CO2培養箱水盤抗菌、殺菌劑

#01-867-1B (100 mL)

Aquaguard -2 (500X) 水浴槽抗菌、殺菌劑

#01-916-1E (50 ml)

