

最高品質的肯定

CiteAb 是全球生命科學試劑領域極具公信力的年度獎項，基於文獻引用增長率，ELK Biotechnology 榮獲 2026最佳ELISA試劑供應商



CiteAb

WINNER

ELISA KIT SUPPLIER TO WATCH




ELK Biotechnology

ELK ELISA 已應用於全世界醫學和生物學研究項目，是全球研究人員的可靠選擇。ELK ELISA 的生產遵循嚴格的三步驟品質控制流程，範圍涵蓋原材料、半成品和成品，從而確保了高靈敏度和特異性，以及卓越的產品效能。



ELK Biotechnology® ELISA 試劑盒

ELK Biotechnology 十多年來一直專注於抗體、蛋白質和 ELISA 試劑盒的研發和生產。我們基於現有技術平台提供數千種 ELISA 試劑盒，涵蓋超過100種檢測項目。包括人類、大鼠、小鼠、兔子、豬、牛、山羊、綿羊、豚鼠、雞、斑馬魚在內的20種動物，都被用於此實驗。在免疫化學、腫瘤、神經學、細胞週期、訊號傳導等眾多研究領域。產品通過ISO9001和CE認證，暢銷全球70多個國家。產品引用次數超過2500次，深受研究者信賴。

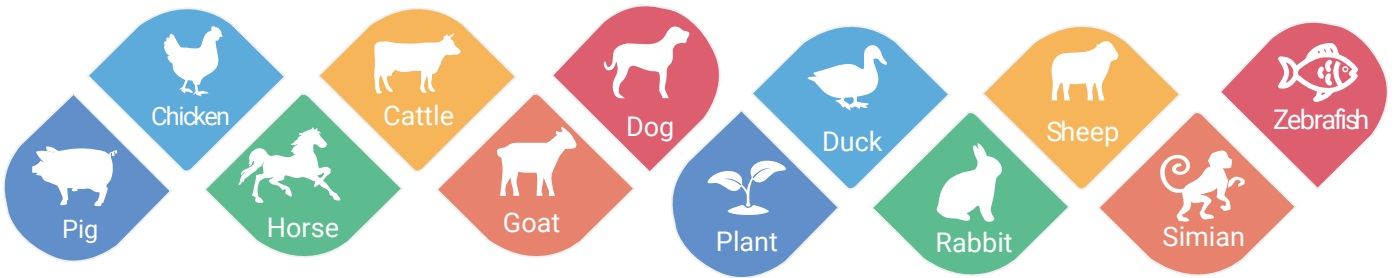

ELISA 試劑盒的優勢

品項齊全

數千種ELISA試劑盒

品質優良

試劑齊全，可直接使用

高靈敏度

pico gram 偵測等級

高精準度

組內變異係數和組間變異係數 <10%

高回收率

85%~115%

高特異性

交叉反應率 <5%

多樣化的產品設計



Conventional Method



EasyStep Method



Micro Sampling

Convectional：自行配置不同濃度標準品，加樣後加入一抗培育80分鐘，洗滌後加入二抗培育50分鐘，再次洗滌後呈色並讀盤，需時約4小時。

EasyStep：標準品已配好在試劑盤，加樣後加入一二抗混合試劑培育1小時，洗滌後呈色並讀盤，1.5小時完成實驗。

MicroSample：樣品只需要25ul，可達到一樣的敏感度，節省你珍貴的樣品。

ELISA與抗體皆有大小包裝

ELK ELISA 試劑不僅有 96 test 與 48 test 兩種包裝，抗體也同樣提供 50ul 與 100ul 大小包裝，充分滿足您不同實驗數量的需求，同時ELK Biotechnology也提供各式不同物種與顏色的二級抗體，完美符合各種實驗需求。



高點數文獻發表



詳細資訊

期刊	Impact Factor	品項	包裝
Signal Transduction and Targeted Therapy	52.7	Human VEGFA, IL-10, TGF b, AGR1	ELK1129, ELK1142 ELK1185, ELK1790
Cancer Cell	48.8	Mouse SFRP2	ELK6778
SCIENCE	44.8	Human Malonyl CoA DHA	ELK0846, ELK8137
Nature Biotechnology	33.1	Mouse F9	ELK1562,
Advance Materials	27.4	Rat VEGFA, ADM	ELK2320, ELK4877

ELISA 相關試劑與耗材

品名	料號	包裝
TMB HRP substrate	SUMTMBW-0100-01	100 ml
Corning ELISA plate	COR9018	100 plate
Corning 50 mL Reagent Reservoirs	COR4870	200 pcs

